

## L'identification de substances

**Les réactifs colorimétriques** concernent le sang et les liquides séminaux. Ils confirmeront leur nature afin de procéder à un prélèvement utile. L'analyse se fait par test-frottis afin de ne pas abîmer le produit envoyé ensuite au laboratoire. Ces réactifs fonctionnent aussi bien sur les liquides frais que secs.

**Le test identi-PSA** immunochromatographique pour la détection d'antigènes spécifiques de la prostate.

Destiné à un usage en médecine légale, il offre tout à la fois une grande sensibilité, rapidité et simplicité

**Test rapide pour la détection du PSA** à partir d'échantillons biologiques classiques (**sérum, plasma ou sang**) mais aussi à partir d'échantillons de sperm.

L'eau PPI ou le sérum physiologique permet d'humidifier le sang séché avant de le prélever.

### Réaction colorimétrique


Référence	Caractéristiques
DCB101	<b>Reactif Phénophtaleine</b> ( 118ml) Réagi avec le composant hème du sang entrainant une couleur positive rose, Utilisation en laboratoire
LUMINOL16	Il a une fonction différente des références ci-dessus, à savoir qu'il a été étudié pour faire apparaître en bleu des traces de sang nettoyées ce qui reste intéressant pour l'orientation de l'enquête. La coloration ne dure pas longtemps, juste le temps de prendre une photo. S'applique par vaporisation. Conditionné en 2 flacons, le mélange des deux (50/50) a une durée de conservation très courte (20 min). Vaporisateur de 475ml.
PSID100	<b>Kit de 10 tests d'analyse séminale</b> couleur positive pourpre.
BLUEPSA	Boîtier réactif <b>BLUESTAR® Identi-PSA</b> avec Flacon de prélèvement contenant 1 ml de solution d'extraction et Écouvillon stérile ( 24 tests)



DCB101



PSID100

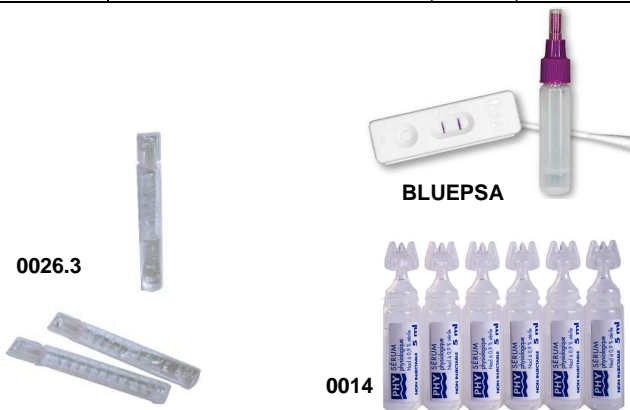

Référence	Caractéristiques
0026.3	<b>Eau PPI</b> - Eau stérile en pipettes de 3ml (10)
0014	<b>Sérum physiologique</b> - pipettes de 5ml
0030	<b>Compresses de gaz stériles</b> (10) dim. 10 x 10cm
CC200M	<b>Carrés de coton</b> (200) dim. 10 x 8cm



0030

Tel: 01 39 13 59 85 - Fax:01 39 13 70 07 - [www.gbr-criminalistique.com](http://www.gbr-criminalistique.com)

**CATALOGUE GENERAL 2021**

## Révéléateur de sang Bluestar® Forensic

Le BLUESTAR permet aux techniciens d'investigations criminelles de révéler les traces de sang invisibles à l'œil nu. Basé sur le principe de la chimiluminescence, ce révélateur de sang est le plus performant pour une utilisation sur scène de crime ou en laboratoire. Il n'altère par l'ADN et est facile à mettre en œuvre. Pulvériser sur les surfaces à l'aide de nos différents micro-diffuseurs et selon le produit choisi.

Seul ou en complément du BLUESTAR® FORENSIC, l'HEXAGON OBTI et le BVD-HEM permettent de déterminer si la trace de sang révélée est d'origine humaine.

Rapide, simple et facile d'utilisation.



BLUE500



BLUEOBTI



BLUEMAG



SPU6



BLUEECO



BLUECP



SYNB8



BVD-HEM

Référence	Caractéristiques
BLUE500	<b>BLUESTAR®</b> , kit révélateur pour traces de sang effacées qui <b>ne détruit pas l'ADN</b> (500ml). Luminescence bleu électrique.
BLUEMINI	<b>BLUESTAR®</b> mini kit (2 x 125ml)
BLUECP BLUECP8	<b>BLUESTAR®</b> en comprimés. 4 doses pour préparation de 4 x 125ml. 8 doses pour préparation de 8 x 125ml.
BLUETR4	<b>BLUESTAR® TRAINING</b> (4 doses) Destiné aux entraînements
BLUEMAG	<b>BLUESTAR® FORENSIC MAGNUM</b> Bouteille 125ml de solution chimiluminescente 1 sachet de 3 comprimés d'oxydant
BLUESPRAY	Vaporisateur 500ml
BLUEECO	<b>Microdiffuseur à pulvérisation ultrafine</b> pour éviter les coulures sur supports lisses. Recommandé avec <b>BLUESTAR® MAGNUM</b> . Inclinaison à plus de 45°. (Vente au détail possible : flacon, réserve de pression 49ml)
SPU6	<b>Kit micro-pulvérisateur 177ml avec réserve de gaz</b> (Vente au détail possible : flacon 177ml, réserve de gaz)
BLUEOBTI	<b>HEXAGON OBTI</b> , test de dépistage rapide permettant de vérifier, en 2 à 3 minutes, qu'une trace de sang est bien d'origine humaine. Livré en coffret de 24 tests.
BLUEOBTI-6	<b>HEXAGON OBTI</b> pour détection de sang humain (6 tests)
BVD-HEM	Test pour détection sang humain (20) Résultat en 10 minutes. Kit composé d'un boîtier réactif, d'un flacon de 2ml de solution et d'un écouvillon stérile
0003	<b>Sang artificiel 125ml</b>
SYNB8	<b>Sang artificiel 240ml</b> - réagit au Bluestar Idéal pour l'entraînement